


**ČIUŽINYS PRAGULŲ PROFILAKTIKAI
POROLONA MATRACIS IZGULĖJUMU PROFILAKSEI
LAMATISTEVASTANE VAHTMADRATS
ANTI BED-SORE FOAM MATTRESS
МАТРАС ПОРОЛОНОВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОЛЕЖНЕЙ
VISKO-2**

Naudojimo ir priežiūros instrukcija
Lietošanas un kopšanas instrukcija
Kasutusjuhend
User manual
Руководство по эксплуатации



VISKO-2

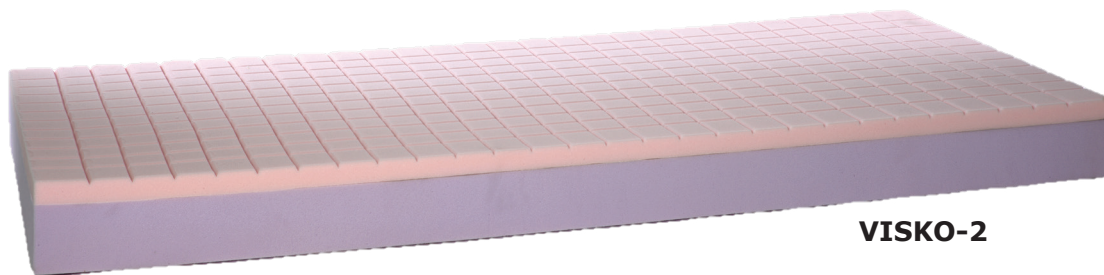

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo ir priežiūros instrukciją!
Pirms lietojiet, lūdzu izlasiet uzmanīgi lietošanas un kopšanas instrukciju!
Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit!
Observe instructions for use! Please read these instructions carefully before use and keep it for later reference!
Прежде чем использовать внимательно прочтите инструкцию!

PRATARMĖ / IEVADS / EESSÕNA / PREFACE / ПРЕДИСЛОВИЕ

- Gerbiamas Kliente, nuoširdžiai dėkojame įsigijus Kid-Man priemonę. Kiekviena priemonė, prieš palikdama gamyklą patikrinama, todėl Jus pasiekia tik kokybiškas gaminys.
- Godājamais Klient, no sirds pateicamies, ka iegādājāties Kid-Man līdzekli. Katrs līdzeklis, pirms pamet rūpnīcu, tiek pārbaudīts, tāpēc Jūs sasniedz tikai kvalitatīvs izstrādājums.
- Täname Teid, meile osutatud usalduse eest, omandades rulaatori. Iगत rulaatorit testib valmistaja, tagades parima töökindluse.
- Thank you for the confidence shown in Kid-Man. Every product is factory checked and left us in faultless condition, We wish you much success and we hope Kid-Man product will make a positive impact to your daily living.
- Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказали нам, приобретя продукт Kid-Man. Каждый продукт тестируется производителем и покидает завод в наилучшем состоянии.

PASKIRTIS IR SAVYBĒS / MĒRĶIS UN ĪPAŠĪBAS / KASUTAMINE / INDICATIONS / ПРИМИНЕНИЕ

- Čiužinys su viskoelastiniu porolonu skirtas ligoniams turintiems aukštą pragulų riziką. Čiužinys pagamintas iš dviejų skirtingo tankio ir rūšių porolono sluoksnių, viršutinis – viskoelastinis porolonas, apatinis - ypač didelio tankio porolonas, kuris suteikia stabilumą. Viršutinis čiužinio viskoelastinio porolono sluoksnis profiliuotas kubelių forma, kurio kraštinė 6 cm.
- Matracis ar viskoelastāna porolonu paredzēts slimniekiem ar augstu izgulējumu risku. Matracis izgatavots no divu dažāda blīvuma un veida porolona slāņiem, virsējais – viskoelastāna porolons, apakšējais – īpaši liela blīvuma porolons, kas piešķir stabilitāti. Virsējais viskoelastāna porolona slānis profilēts kubiju formā, kuras mala 6 cm.
- VISKO-2 madrats on patsientidele, kellel on keskmine risk amatiste tekkeks. Ehituslikult koosneb madrats kahest kihist. Alumine kiht on valmistatud elastsest ja tihedast vahust mis annab stabiilsuse. Pealmine kiht on valmistatud māluga vahust, mis adapteerub täielikult kasutaja kehaga ning jagab surve ühtlaselt. Enamgi veel, māluga vahu pind koosneb üksteisest eraldatud kastidest mis tagab vaba õhuringluse.
- VISKO-2 mattress is intended to be used for patients at medium risk of bedsore development. The structure is made of two layers. The bottom layer is made of high resilience and density foam which gives stability. The top layer is made of memory foam which perfectly adapts to user`s body and distributes pressure evenly. Moreover, surface of memory foam is castellated in cube profiles which allows free air circulation

• Наш матрас VISKO-2 предназначен для использования для пациентов со средней степенью риска развития пролежней. Конструкция состоит из двух слоев. Нижний слой изготовлен из высокоэластичной и высокоплотной пены, которая гарантирует стабильность. Верхний слой изготовлен из пены с эффектом памяти, которая отлично приспосабливается к телу пациента и равномерно распределяет давление. Кроме того, поверхность пены с эффектом памяти сконструирована с зазубринами в кубических профилях, что обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, а также предотвращает кожу от трения и поперечных сил.

PAKUOTĖS TURINYS / IESAIŅŪJUMA SATURS / PAKENDI SISU / CONTENT OF PACKAGE / СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

1x Čiužinys / Matracis / Madrats / Mattress / Матрас

1x Medicininis užvalkalas / Matrača pārvalks / Madratsi kaitsekate / Mattress protective cover / Чехол для матраса

NAUDOJIMAS / LIETOŠANA / KASUTAMINE / OPERATION / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Čiužinys varotojui pateikiamas apvilktas medicininis užvalkalas.
- Matracis lietotajam tiek sniegts apvilktas medicīniskajā pārvalkā.
- Kogu madrats on kaetud spetsiaalse meditsiinilise kattega. See on kasutamiseks valmis.
- Whole mattress is covered with special medical fabric. It is ready to use.
- Матрас поставляется в медицинском чехле.



- Rekomenduojame čiužinius laikyti ant tvirto pagrindo, užtikrinančio gerą oro pralaidumą.
- Matračus ieteicams turēt uz izturīga pamata, kas garantē labu gaisa caurlaidību.
- Soovitav on asetada madrats tugevale põhjale, mis oleks õhku läbilaskev.
- It's recommended to place the mattress on the solid base, which would be air permeability.
- Матрас рекомендуется размещать на прочную поверхность, обеспечивающую хорошую вентиляцию.



- Dėl elastingų čiužinio sudedamųjų medžiagų gali atsirasti leistinas 1 - 2 cm čiužinio dydžių nuokrypis, labiausiai svorio veikiamose vietose putų poliuretano čiužiniai gali suminkštėti. Tai nereiškia, kad gaminy yra nekokybiškas, šios čiužiniuose naudojamų medžiagų savybės nelaikomos broku.
- Matrača elastigo sastāvdaļu dēļ var veidoties pieļaujama 1–2 cm matrača izmēru novirze, vietās, kuras visvairāk ietekmē svars, putu poliuretāna matračī var kļūt mīksti. Tas nenozīmē, ka izstrādājums nav kvalitatīvs, šīs matračos izmantojamo materiālu īpašības netiek uzskatītas par brāķi.
- Madratsis on elastsed komponendid, seetõttu võib suurus muutuda 1-2 cm. Vahu omadused kohtades kuhu langeb raskus võib muutuda. Seda omadust ei loeta praagiks.
- Mattress has an elastic components, so there can appear permissible 1-2 cm deflection of the size. The properties of the foam in the places which have a loads might be changed. This property is not considered as a spoilage.
- Матрас изготовлен из эластичных материалов, поэтому может образоваться допустимое отклонение размеров матраса в 1 – 2 см; в местах, наиболее сильно подвергаемых воздействию веса, пенополиуретановый матрас может смягчиться. Это не означает, что изделие является некачественным, данные свойства материалов, используемых в матрасах, не считаются браком.

PRIEŽIŪRA / UZKOPŠANA / HOOLDUS / CARE AND MAINTENANCE / УХОД

- Čiužinys atsparus temperatūros svyravimams nuo 0°C iki +50°C.
- Matracis ir izturīgs pret temperatūras svārstībām no 0°C līdz +50°C.
- Vahtmadrats kannatab temperatuuri vahemikus 0°C kuni +50°C.
- The foam mattress is a resistant to temperature from 0°C to +50°C.
- Матрас стойкий к температурным колебаниям от 0°C до +50°C.

- Nelaikykite čiužinio tiesioginėje saulėje, drėgnoje aplinkoje.
- Neturiet matraci tiešos saules staros, mitrā vidē.
- Toodet peab hoiustama kuivas keskkonnas, eemal otsesest päikesevalgusest.
- The product should be stored in a dry environment, away from direct sunlight.
- Не храните матрас в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, во влажной среде.

- Čiužinius rekomenduojame reguliariai vėdinti (4 - 6 kartus per metus).
- Matračus ieteicams reguliari vėdināt (4–6 reizes gadā).
- Soovitatud on madratsit regulaarselt ventileerida (4-6 korda aastas).
- It is recommended to ventilate the mattress regularly (4-6 times a year)
- Матрасы рекомендуется регулярно проветривать (4 – 6 раз в год).

- Čiužinio užvalkalas yra nusegamas ir skalbiamas arba chemiškai valomas (galima skalbti 95°C, autoklavuoti +120°C)
- Matrača pārvalks ir novelkams un to var mazgāt vai ķīmiski tīrīt (var mazgāt 95°C, autoklavēt +120°C).
- Madratsi kattel on L-kujuline lukk. Katet vōib desinfekteerida autoklaavis kuni +120 °C, pestav kuni +95 °C.
- The cover of the mattress has a L-shaped zipper. Cover could be disinfected in autoclave at +120 °C, washable up to +95 °C
- Чехол матраса снимается и может подвергаться стирке или химической чистке (стирка до 95°C, автоклав +120°C)

- Porolonas tinkamas dezinfekuoti dezinfekavimo kameroje 15-20 min, 105° temperatūroje.
- Porolons piemērots dezinfekcijai dezinfekcijas kamerās 15–20 min, 105° temperatūrā.
- Vahust osa on samuti võimalik desinfekteerida desinfektsiooni kambris 15-20 minutit, temperatuuril 105 °C.
- Foam could be also disinfected in disinfection chamber for 15-20 min at 105 °C temperature.
- Поролон в дезинфекционной камере дезинфицировать можно 15-20 мин при температуре 105°.

SPECIFIKACIJOS / SPECIFIKACIJAS / TEHNILISED ANDMED / SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Modelis / Modelis / Mudel / Model / Модель	VISKO-2
Maksimali apkrova / Maksimālā slodze / Max koormus / Maximum safe load / Максимальная нагрузка	200 kg
Svoris / Svars / Kaal / Weight / Вес	13 kg
Bendras aukštis / Kopējais augstums / Kogukõrgus / Overall height / Общая высота	15 cm
Bendras plotis / Kopējais platums / Kogulaius / Overall width / Общая ширина	90 cm
Bendras ilgis / Kopējais garums / Kogupikkus / Overall length / Общая длина	200 cm

GARANTIJS SĀLYGOS / GARANTIJAS NOSACĪJUMI / GARANTIITINGIMUSED / WARRANTY / УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

• Priemonei suteikiama 24 mėnesių garantija nuo įsigijimo dienos. Gamintojas bei platintojas prisiima atsakomybę tik dėl defektų, kurie atsirado tiesiogiai dėl gamintojo proceso ar netinkamos kokybės medžiagų.

Gamintojas bei platintojas nepriima atsakomybės dėl defektų:

- atsiradusių naudojant gaminį ne pagal paskirtį, nesilaikant naudojimo ir priežiūros instrukcijų;
- atsiradusių naudojant ne originalias gamintojo detales ar taisant priemonę gamintojo neapbruotoje vietoje;
- atsiradusių dėl gamtos stichijų ar naudotojo kompetencijos stokos ir neatsargumo.

Garantija galioja tik su užpildyta garantine kortele. Įvertinęs prekės gedimą, UAB „Kasko Group“ atstovas informuoja, ar gedimas garantinis. Jei gedimas garantinis, UAB „Kasko Group“ nusprendžia, ar sutaisyti prekę, ar pakeisti ją nauja. Prekės sutaisymas garantinio periodo nepratęsia. Garantinio aptarnavimo terminas – 4 savaitės nuo prekės gavimo UAB „Kasko Group“. Jeigu prekės remontas nėra garantinis, visas remonto išlaidas apmoka pirkėjas.

• Palūgindžeklim garantija tiek piešķirta uz 24 mēnešiem no iegadāšanas datuma. Ražotājs un izplatītājs uzņemas atbildību tikai par defektiem, kas radās saistībā ar ražošanas procesu vai sliktas kvalitātes materiāliem.

Ražotājs un izplatītājs neuzņemas atbildību par defektiem:

- kas radās palūgindžekli lietojot neatbilstoši paredzētajam mērķim vai neievērojot lietošanas un kopšanas instrukciju;
- kas radās lietojot neoriģinālas ražotāja detaļas vai remontējot palūgindžekli ražotāja neapstiprinātā vietā;
- kas radās saistībā ar dabas stihijām vai lietotāja kompetences trūkumu un piesardzības dēļ.

Garantija ir spēkā tikai tad, ja tika uzpildīta garantijas karte. UAB „Kasko Group“ pārstāvis izvērtē preces bojājumu un informē, vai tas ir garantijas gadījums. Ja tas ir garantijas gadījums, UAB „Kasko Group“ nolemj, vai prece jāremontē, vai jānomaina ar jaunu preci.

Preces saremontēšana nepagarina garantijas termiņu. Garantijas apkalpošanas termiņš – 4 nedēļas no dienas, kad precī saņēma UAB „Kasko Group”. Ja tas nav garantijas gadījums, visus remonta izdevumus sedz pircējs.

• Garantii kehtib 24 kuud ostu hetkest. Garantii kehtib, kui defekt on tekkinud valmistaja tootmisveast või ebakvaliteetse materjali kasutamisest.

Tootja ja müüja ei vastuta defektide eest:

- kui eset on kasutatud mitte sihipäraselt, eirates ekspluatatsiooni juhiseid;
- kui on kasutatud mitteoriginaalseid varuosasid, remonditud mitte aktsepteeritud remontija juures;
- rikete eest, mis on tekkinud stiihia, hooletu kasutamisega.

Garantii on kehtiv ainult garantii talongi alusel. “Kasko Group” esindaja hindab ja teeb kindlaks, kas garantii kehtib. Garantiihoolduse aeg on 4 nädalat kauba saabumise hetkest remonti. Ilma garantiita kauba remont on ostja kulul.

• We issue a warranty of 24 months from date of purchase. Any unauthorized modifications carried out without approval of the manufacturer will make the liability null and void. This includes exceeding the maximum user loads and using product in improper way. Warranty is only valid with fully filled warranty card. UAB „Kasko Group” after getting claimed item from purchaser within period of 4 weeks decides whether issue is treated under warranty. If issue is not covered under warranty and customer agrees, UAB „Kasko Group”, if possible, fixes issue. All costs, including costs of transportation, should be covered by customer. Warranty repair does not extend warranty.

• Гарантия действительна в течении 24 месяцев с момента покупки. Гарантия действует, если возникшая неисправность вызвана дефектом, связанным с производством изделия или при использовании некачественных материалов.

Производитель и дистрибьютор не несет никакой ответственность за дефекты

- В результате использования изделия не по назначению, не придерживаясь инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию;

- Вызванные используя неоригинальные детали и ремонтируя в неутвержденных производителем местах;

- Вызванные стихийными бедствиями или по некомпетентности и халатности пользователя.

Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона. Представитель ЗАО Каско Групп оценивает неисправность и устанавливает действует ли гарантия. Если ремонт гарантийный, ЗАО Каско Групп принимает. Срок гарантийного обслуживания

– 4 недели от получения товара на ремонт. Если ремонт не гарантийный – все расходы за ремонт оплачивает покупатель.

GARANTINĖ KORTELĖ / GARANTIJAS KARTE / GARANTIIKAART / WARRANTY CARD / ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Prekės pavadinimas Preces nosaukums Kaubanimetus Products name Наименование товар	Modelis Modelis Mudel Model Модель	Pardavimo data (įrašyti) Pārdošanas datums (ierakstīt) Müügikuupäev Date of purchase (insert) Дата продажи (вписать)	Garantinis terminas Garantijas termiņš Garantiaeg Warranty period Гарантийный срок
Čiužinys pragulų profilaktikai Porolona matracis izgulējumu profilaksei Lamatistevastane vahtmadrats Anti bed-sore foam mattress Матрас поролоновый для профилактики пролежней	VISKO-2		24 mėnesių 24 mēneši 24 kuud 24 months 24 месяцев

Place for SN

Your dealer

Išleido / Izdevējs / Toimetaja / Published by / Издатель:

UAB Kasko Group

A. Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 52167425 • Faks. +370 52167425

www.kid-man.eu • info@kid-man.eu

Data / Datum / Kuupäev / Date / Дата 2016-12-13

